


Sengevipper

PRODUKT NR.: SV-40000

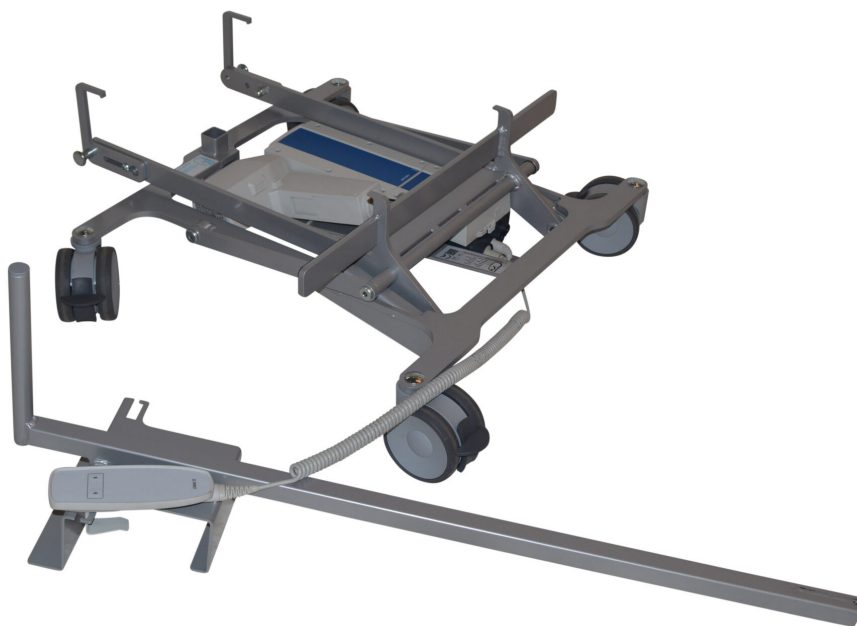

Sengevipper letter flytningen af senge og fremmer det gode arbejdsmiljø. Personalet spares for mange rygløft.

SENGEVIPPER

Sengevipperen køres ind under sengen. Herefter vippes sengen op i ca. 60 gr. Sengen kan nu køres ud gennem døren og videre til næste opgave, opbevaring eller rengøring.

- Elektrisk vippefunktion
- Låsbare hjul
- Aftagelig batteri
- 4 låsbare hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 57 cm
- Bredde 64 cm
- Vippevinkel 60°
- Min. frihøjde under seng 155 mm
- Max belastning 150 kg
- Hjul diameter 100 mm
- Tæthedsklasse for vand IPX4
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

